


# LINUS<sup>®</sup>

## ENDOPRÓTESE STENT-GRAFT

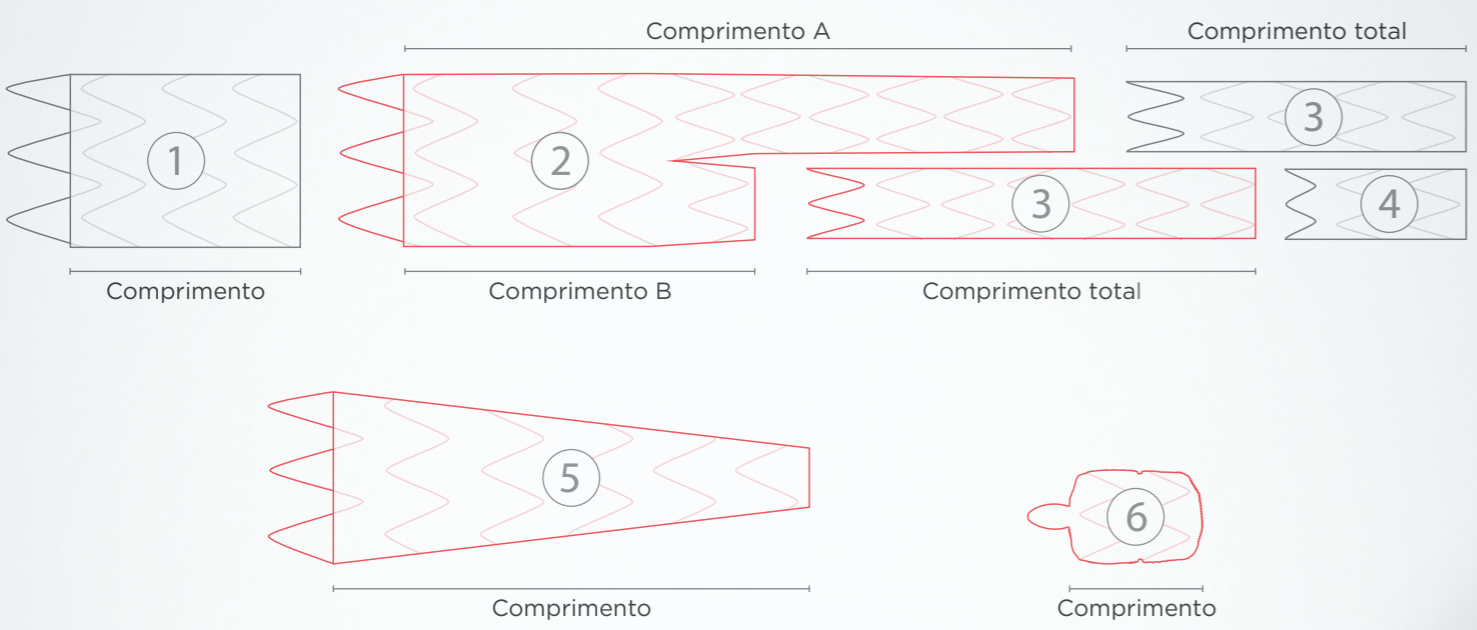

1   Extensão Aórtica	2   Corpo Principal	3   Extensão Iliaca	4   Cuff Distal	5   Aorto-Iliaco	6   Oclisor
Diâmetro 24 a 36 mm	Diâmetro Proximal 24 a 36 mm	Diâmetro Proximal 14 mm	Diâmetro Proximal 12 a 22 mm	Diâmetro Proximal 24 a 36 mm	Diâmetro 14 a 22 mm
	Diâmetro Distal 14 mm	Diâmetro Distal 12 - 14 - 16 - 18 20 - 22 mm	Diâmetro Distal 12 a 22 mm	Diâmetro Distal 14 mm	
Comprimento 40 mm	Comprimento A 80 e 155 mm	Comprimento 40 - 60 - 80 - 100 120 - 140 mm	Comprimento 40 mm	Comprimento 90 e 150 mm	Comprimento 20 mm
Free Flow 20mm	Free Flow 20mm			Free Flow 20mm	
Perfil 18 - 20Fr	Perfil 18 e 20Fr	Perfil 16Fr	Perfil 16Fr	Perfil 18 e 20Fr	Perfil 16Fr

**\*Consulte disponibilidade para customização.**

Endoprótese Stent-Graft Dominus  
Registro ANVISA nº 10159030093

Código catálogo 604506  
Rev. 03

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.  
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I  
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil  
Telefone #55 17 2136 7000 • Fax #55 17 2136 7040  
CNPJ: 52.828.936/0001-09  
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010  
Registro ANVISA nº 10159030096  
www.braile.com.br





► **Ponteira Flexível**

Radiopaca atraumática

► **Hidrofílica**

Revestimento hidrofílico para diminuição de atrito

► **Anti-Kink**

Para melhor navegabilidade

► **Precisão**

Sistema multiplicador de força

Trava de segurança

**BAIXO PERFIL**  
**18 -20Fr**

- **Flexibilidade**
- **Maior precisão e segurança**
- **Menor atrito**

► **Free Flow**

Stent não revestido para expansão da região de fixação

► **Sutura**

Suturas em poliéster para fixação do esqueleto metálico

► **Revestimento**

Poliéster tubular de baixa porosidade

► **Nitinol**

Liga metálica superelástica com memória térmica  
Grande resistência à corrosão e fadiga

► **Ypsilateral**

Exoesqueleto

► **Força Radial**

Regiões proximal e distal com força radial aumentada para melhor fixação e vedação

► **Marcas Radiopacas**

Proximais e distais para facilitar posicionamento e localização da endoprótese

► **Contralateral**

Extensões Modulares

► **Cateter Balão**

Complacente para acomodação da endoprótese 12Fr/45mm  
Fornecido separadamente

Endoprótese metálica autoexpansível, revestida de poliéster com estrutura de Nitinol. Fixação por Força Radial.

Oversize recomendado de 15 a 20% sobre diâmetro do colo de fixação.